



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Puh: 440-942-6161  
Faksi: 440-942-2257  
Sähköposti: volk@volk.com



**EU-edustaja:**  
Rudolf Riester GmbH  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Saksa  
Sähköposti: [info@riester.de](mailto:info@riester.de)  
Puhelin: +49 74 77 / 92 70-0  
Faksi: +49 74 77 / 92 70-70



## Volk®1 Kertakäyttöinen Epäsuora Laajakenttäinen Vitrektomialinssi

- STERIILI. STERILOITU ETYLEENIOKSIDIKAASULLA.
- VAIN KERTAKÄYTTÖÖN.
- ÄLÄ KÄYTÄ, JOS PAKKAUS ON AVATTU TAI VAURIOITUNUT.
- YHDYSVALTAIN LAKI RAJOITTAÄ TÄMÄN LAITTEEN MYYNIN VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

## SUOMI (FI): KÄYTTÖOHJEET

### KÄYTTÖAIHEET

Volk®1 Kertakäyttöinen Epäsuora Laajakenttäinen Vitrektomialinssi on tarkoitettu käytettäväksi silmänpohjan tutkimiseen diagnostiikkalinssinä sekä silmän sisäisten sairauksien hoitoon. Laite on steriili, kertakäyttöinen ja hävitettävä linssijärjestelmä.

### TEKNISET TIEDOT

| Tuote                                                             | Tuotekoodi | Suurennus | Näkökenttä |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Volk®1 Kertakäyttöinen Epäsuora Laajakenttäinen Vitrektomialinssi | VVITSSVDH  | 0,55x     | 106°       |



### VAROITUKSET

1. Älä upota laitetta dekontaminointiaineeseen ennen käyttöä. Älä suihkuta mitään nestettä laitteeseen ennen tai käytön aikana.
2. Tarkasta laite vaurioiden varalta (esim. naarmut, halkeamat). Älä käytä tai korjaa viallista laitetta.
3. Tarkista kontaktipinnat – vaurioituneita laitteita ei saa käyttää tai korjata.
4. KAIKKI VAKAVAT LAITETTA KOSKEVAT TAPATURMAT TULEE ILMOITTAÄ VALMISTAJALLE JA KANSALLISELLE TOIMIVALTAISELLE VIRANOMAISLLE.



### VAROTOIMET


1. Älä yritä käyttää Volk®1-kertakäyttöistä epäsuoraa laajakenttäistä vitrektomialinssiä ennen kuin olet täysin lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet.
2. Vain laillistetun lääkärin käytettävissä tavalla, joka on yhdenmukainen muiden suorakuvantavien oftalmisten kosketuslasier- ja diagnostiikkalinssien kanssa.
3. Steriloitu pakkaus ja linssi on tarkastettava ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, mukaan lukien reiät, sukkemisivauriot, irtonaiset osat tai pakkauksessa näkyvät partikkelit.
4. Volk®1 Kertakäyttöinen Epäsuora Laajakenttäinen Vitrektomialinssi on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön.
5. Taivuta VVITSSVDH-vartta haluamaasi kulmaan ennen linssin asettamista sarveiskalvolle. Älä taivuta vartta yli 20° pystysuorasta. Älä kierrä vartta.
6. Älä steriloitu uudelleen ja käytä uudelleen.
7. Tämä laite on pakattu ja steriloitu vain kertakäyttöä varten. Älä käytä uudelleen, käsittele uudelleen tai steriloitu uudelleen. Uudelleenkäyttö, uudelleenkäsitely tai uudelleensterilointi voi aiheuttaa kontaminaation riskin ja/tai potilaan infektoitumisen tai ristiinfektion, mukaan lukien mutta ei rajoituen tartuntatautiin siirtymiseen potilaalta toiselle. Laitteen kontaminaatio voi johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.

### VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ

Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

### KÄYTTÖOHJEET

1. Avaa pakkaus steriilissä tilassa.
2. Kaikki linssimallit edellyttävät, että metyyliselluloosaa tai muuta vastaavaa viskoosia rajapintaliuosta levitetään koveralle kosketuspinnalle (eli sarveiskalvon ja laitteen väliin).
3. VVITSSVDH-kahvan käyttöön on vapaaehtoisia. Linssin ja kahvan kokoamiseksi pidä objektiivia mustan linssirenkaan tyvestä. Pidä linssi ja kahva yhdensuuntaisina. Liu'uta kahvan pidike mustan linssirenkaan ylimmän harjanteen ympäri.

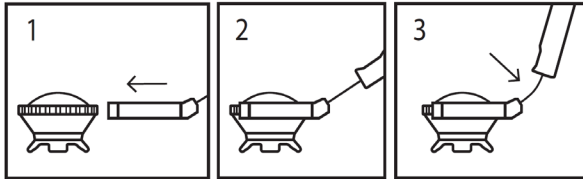

4. Volk®1-kertakäyttöinen epäsuora laajakenttäinen lasialinssi on kirurginen linssilaitte, joka asetetaan sarveiskalvoon ja joka auttaa parantamaan takimmaisen ja perifeerisen verkkokalvon kuvien tarkkuutta ja selkeyttä kirurgisen toimenpiteen aikana.

### SÄILYTYS

Laitteet tulee säilyttävä huoneenlämmössä. Steriilit välineet on säilytettävä tilassa, joka suojaa steriiliyden menettämiseltä.

### LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämän tuotteen luvaton hävittämistäpaä voi olla haitallista ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Älä hävitä linssiä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Noudata hävittämässä paikallisia lakeja ja säädöksiä.



Steriiloitu  
etyleenioksidilla



Ei saa  
käyttää  
uudelleen



Katso  
käyttöohjeista  
tärkeitä varoittavia  
tietoja.



Älä käytä, jos  
pakkaus on  
vaurioitunut tai  
avattu



Viimeinen  
käyttöpäivä



Eränumero



Viitenumero



Valmistaja



Valtuutettu  
edustaja EU-  
alueella



Lääkinnälliset  
laitteet