



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060, ASV
Tālr.: 440-942-6161
Fakss: 440-942-2257
E-pasts: volk@volk.com



ES pārstāvis:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Vācija
E-pasts: info@riester.de
Tālrunis: +49 74 77 / 92 70-0
Fakss: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas lēca vienreizējai lietošanai

- STERILS PRODUKTS. STERILIZĒTS AR ETILĒNA OKSĪDA GĀZI.
- TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.
- NELIETOT, JA IEPAKOJUMS IR ATVĒRTS VAI BOJĀTS.
- ASV FEDERĀLIE LIKUMI IEROBEŽO ŠIS IERĪCES PĀRDOŠANU — TO DRIKST PĀRDOT TIKAI AR ĀRSTA NORĀDĪJUMU VAI PĒC VIŅA PASŪTĪJUMA.

LATVIEŠU (LV): LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NORĀDES LIETOŠANAI

Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas lēca vienreizējai lietošanai ir paredzēta acu dibena izmeklējumiem, diagnostikai un intraokulāru slimību terapijai. Šis ir sterils, vienreizlietojams lēcu sistēmas, kas paredzētas vienreizējai lietošanai.

SPECIFIKĀCIJAS

Produkts	Produkta kods	Palielinājums	Redzeslauks
Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas SSV lēca ar rokturi vienreizējai lietošanai	VVITSSVDH	0,55x	106°



BRĪDINĀJUMI

1. Nepieļaujiet ierīces iegremdēšanu dezinfekcijas produktā pirms lietošanas. Pirms lietošanas vai lietošanas laikā neapsmidziniet ierīci ar nekādu šķidrumu.
2. Pārbaudiet ierīci(-es), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un neremontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
3. Pārbaudiet saskares virsmu(-as), lai pārliecinātos, ka nav nekādu bojājumu (piemēram, plaisu, skrāpējumu utt.). Nelietojiet un neremontējiet ierīci, ja tā ir bojāta.
4. PAR JEBKURU NOPIETŅU INCIDENTU, KAS NOTICIS SAISTĪBĀ AR IERĪCI, JĀZIŅO RAŽOTĀJAM UN TĀS DALĪBVALSTS KOMPETENTAJAI IESTĀDEI, KURĀ LIETOTĀJS UN/VAI PACIENTS IR REĢISTRĒTS.



PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


1. Lūdzu, nelietojiet Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas lēcu vienreizējai lietošanai, pirms izlasīsit un pilnībā izpratīsit lietošanas norādījumus.
2. Lietot licencētām ārstam, izmantojot metodi, kas atbilst citām netiešās attēlveidošanas oftalmoloģiskām vitrektomijas lēcām.
3. Pirms lietošanas jāpārliecinās par iepakojuma un lēcas sterilitāti. Nelietojiet ierīci, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts, tostarp ar caurumiem, bojātu blīvējumu, vaļģiem komponentiem vai daļiņām maisiņa iekšpusē.
4. Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas lēca vienreizējai lietošanai ir paredzēta tikai vienam pacientam.
5. Pirms lēcas uzstādīšanas uz radzenes, novietojiet VVITSSVDH rokturi vēlamajā leņķī. Neatlieciet rokturi vairāk nekā 20° no vertikālās pozīcijas. Nesagrieziet rokturi.
6. Produktu nav paredzēts izmantot atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt.
7. Šī ierīce ir iepakota un sterilizēta tikai vienreizējai lietošanai. Produktu nav paredzēts izmantot vai pārstrādāt atkārtoti, nedrīkst atkārtoti sterilizēt. Atkārtota ierīces lietošana, pārstrāde vai sterilizācija var radīt piesārņojuma, inficēšanās vai krusteniskas infekcijas risku, tostarp infekcijas slimību nodošanu citiem pacientiem. Ierīces piesārņojums var izraisīt pacienta traumu, saslimšanu vai nāvi.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Ierīci drīkst lietot tikai līdz iepakojumā norādītajam derīguma termiņa beigu datumam.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

1. Izmēriet lēcu no iepakojuma un novietojiet to sterilā darba vidē.
2. Visu veidu lēcām nepieciešams uzklāt metilcelulozi vai citu līdzīgu viskozu starpslāņa šķidrumu uz ieliektais kontaktvirsmas (t.i., starp radzeni un ierīci).
3. VVITSSVDH rokturis nav obligāti jālieto. Lai montētu lēcu ar rokturi, satveriet lēcu pie melnā gredzena pamatnes. Turiet objektīvu un rokturi paralēli. Pabīdīet roktura klipsi ap melnā lēcas gredzena augšējo malu ar izcili.

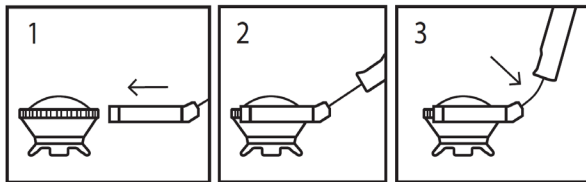

4. Volk®1 platlenķa netiešā vitrektomijas lēca vienreizējai lietošanai ir ķirurģiska lēca, ko novieto uz radzenes, lai uzlabotu precizitāti un attēla kvalitāti tīklenes perifērijā un aizmugurējā daļā, kā arī stiklveida ķermeņa ķirurģiskas iejaukšanās laikā.

UZGLABĀŠANA

Ierīces jāuzglabā istabas temperatūrā. Sterilie instrumenti jāuzglabā vietā, kas nodrošina aizsardzību pret sterilizācijas zudumu.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

Šī produkta nelikumīga utilizācija var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību un vidi. Lēcas nedrīkst utilizēt kā nešķīrotus sadzīves atkritumus. Šī izstrādājuma utilizācija jāveic saskaņā ar attiecīgās teritorijas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.



Sterilizēts,
izmantojot
etilēnoksidu



Nelietot
atkārtoti



Lai iegūtu svarīgu
informāciju, skatiet
lietošanas
instrukciju



Nelietot, ja
iekpojums ir
bojāts vai
atvērts



Derīguma
termiņš



Partijas
numurs



Atsauces
numurs



Ražotājs



Pilnvarotais
pārstāvis
Eiropas Kopienā



Medicīnas
ierīce