



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Telefon: 440-942-6161
Faks: 440-942-2257
E-post: volk@volk.com



EU-representant:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-post: info@riester.de
Telefon: +49 74 77 / 92 70-0
Faks: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins til engangsbruk

- STERIL. STERILISERT MED ETYLENOKSID.
- KUN TIL ENGANGSBRUK.
- SKAL IKKE BRUKES HVIS EMBALLASJEN ER ÅPNET ELLER SKADET.
- FØDERAL LOVGIVNING (USA) BEGRENSER DETTE PRODUKTET TIL SALG GJENNOM ELLER PÅ REKVISISJON FRA LEGE.

NORSK (NO): BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins beregnet for engangsbruk er indisert for bruk som diagnostisk linse ved undersøkelse av øyets fundus og ved behandling av intraokulære abnormiteter. Enhetene er sterile linser til engangsbruk.

SPESIFIKASJONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt
Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins til engangsbruk med håndtak	VVITSSVDH	0,55x	106°



ADVARSLER

1. Ikke senk enheten i et dekontamineringsmiddel før bruk. Ikke spray væske på enheten før eller under bruk.
2. Inspiser enheten(e) for skader (f.eks. sprekker, riper osv.). Ikke bruk eller reparér enheten hvis den er skadet.
3. Inspiser kontaktflaten(e) for skader (f.eks. sprekker, riper osv.). Ikke bruk eller reparér enheten hvis den er skadet.
4. ENHVER ALVORLIG HENDELSE KNYTTET TIL DETTE UTSTYRET SKAL RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN OG DEN KOMPETENTE MYNDIGHET I DET MEDLEMSLANDET DER BRUKEREN OG/ELLER PASIENTEN ER ETABLERT.



FORHOLDSREGLER


1. Ikke prøv å bruke Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins til engangsbruk før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.
2. Skal brukes av en autorisert lege på samme måte som andre oftalmiske vitrektomilins med indirekte bile.
3. Den sterile emballasjen og linsen skal steriliseres før bruk. Ikke bruk enheten hvis emballasjen er åpnet eller skadet, inkludert hull, ødelagt forseiling, løse komponenter eller partikler inne i posen.
4. Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins til engangsbruk er kun beregnet for bruk på én pasient.
5. Bøy VVITSSVDH-håndtaket til ønsket vinkel før monteringen av linsen på hornhinnen. Ikke bøy håndtaket mer enn 5 ganger. Ikke bøy håndtaket mer enn 20° fra loddrett. Ikke vri håndtaket.
6. Må ikke resteriliseres eller brukes på nytt.
7. Denne enheten er pakket og sterilisert kun for engangsbruk. Må ikke gjenbrukes, reposseseres eller resteriliseres. Gjenbruk, repossesering eller resterilisering kan føre til kontaminering og/eller pasientinfeksjon eller krysskontaminering, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av smittsomme sykdommer fra én pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.

UTLØPSDATO

Bruk enheten før utløpsdatoen på pakningsetiketten.

FORSLAG TIL BRUKSANVISNING

1. Ta linsen ut av emballasjen, og plasser den i et sterilt arbeidsområde.
2. Alle linsedesignene krever at metylcellulose eller en annen lignende viskøs grensesnittløsning påføres den konkave kontaktflaten (dvs. mellom hornhinnen og enheten).
3. VVITSSVDH-håndtaket er valgfritt å bruke. Når du skal montere objektivet og håndtaket, holder du objektivet i bunnen av den svarte objektivring. Hold objektivet og håndtaket parallelt. Skyv håndtaksklemmen rundt den øverste, skålførmede kanten på den svarte linseringen.

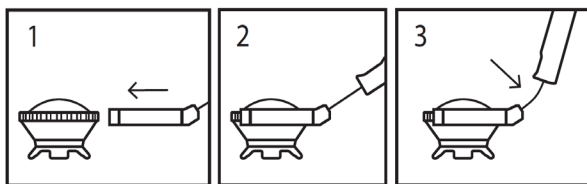

4. Volk®1 Indirekte vidvinkel vitrektomilins til engangsbruk er en kirurgisk linse som plasseres på hornhinnen og bidrar til å forbedre nøyaktigheten og klarheten i bildene av den bakre og perifere netthinnen og av glasslegemet under kirurgiske inngrep.

OPPBEVARING

Utstyr skal oppbevares i romtemperatur. Sterile instrumenter skal oppbevares i et område som gir beskyttelse mot tap av sterilitet.

AVHENDING AV ENHETER

Ulovlig avhending av dette produktet kan ha en negativ innvirkning på menneskers helse og på miljøet. Ikke kast linsen som usortert kommunalt avfall. Når du kasserer dette produktet, må du følge den prosedyren som er i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder i ditt område.



Sterilisert med
etylenoksid



Må ikke
gjenbrukes



Se
bruksanvisningen
for viktig
informasjon om
forholdsregler



Må ikke brukes
hvis
emballasjen er
åpnet eller
skadet



Utløpsdato



Partinummer



Referansenummer



Produsent



Autorisert
representant i
Den europeiske
union



Medisinsk
utstyr